



TabDents

tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem



De TabDents VisiQuick koppeling

De applicatie **TabDents – VisiQuick** koppelt **TabDents** aan **VisiQuick**. Daartoe gebruikt **TabDents** de koppeling die ook **Invisalign** gebruikt: slepen vanuit de **VisiQuick** software. Dat kan naar de tabs 'Röntgenfoto's', 'Lichtfoto's en video's' en 'Persoonsgegevens', sub tab 'Pasfoto patiënt'. Ook de beeldcentrale van **TabDents** wordt ondersteund en door het aanpasbare formaat en de mogelijkheid de beeldcentrale bovenaan te houden is dit wellicht de meest gebruikersvriendelijke koppeling.

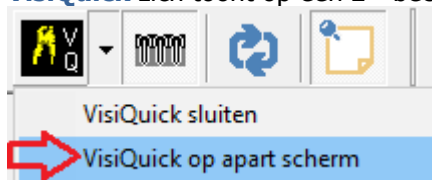
Dit document beschrijft de instellingen die nodig zijn om deze koppeling te realiseren en om een eerste indruk te krijgen van de uitwisselingsmogelijkheden.

1. Update van **TabDents**.
2. Drag and drop mogelijkheden.
3. Mail vanuit **TabDents** met foto's.
4. Installatie **VisiQuick**.



Let op: de beschreven mogelijkheden zijn pas vanaf **VisiQuick** versie **777** beschikbaar!

Als **VisiQuick** getoond wordt op een apart scherm is het nodig om het verbergen van **TabDents** te onderdrukken:

- Markeer 'VisiQuick *NIET* op apart scherm' om te voorkomen dat **TabDents** zich op de voorgrond toont als de beeldcentrale wordt geactiveerd.
- Markeer 'VisiQuick op apart scherm' om te voorkomen dat **TabDents** zich verkleind als **VisiQuick** zich toont op een 2^{de} beeldscherm.



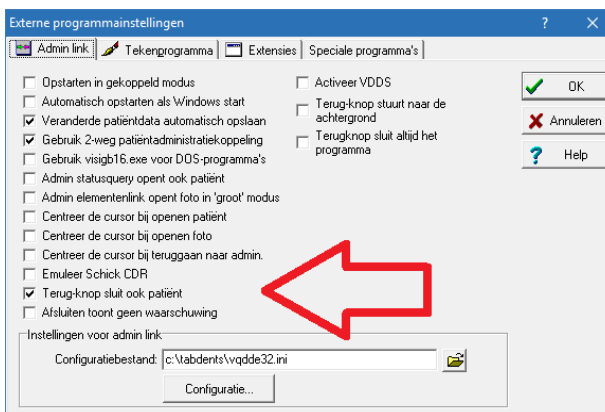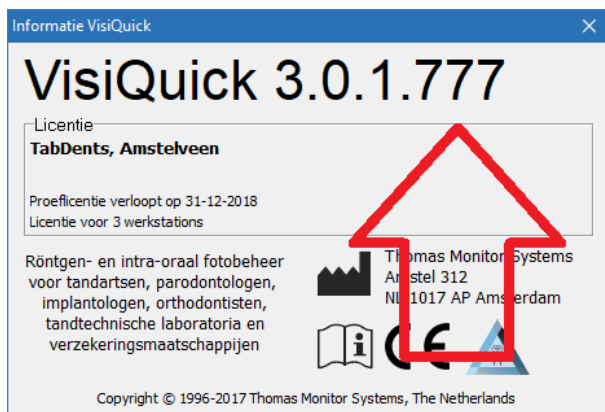- Vink **niet** 'Terugknop sluit ook patiënt' in **VisiQuick**  om te voorkomen dat bij drag and drop van foto's vanuit **VisiQuick** naar **Word** er geen patiënt meer is gekozen. Open **VisiQuick** *voordat* de brief in **TabDents** wordt opgemaakt.



Voor meer informatie: <http://www.visiquick.com/nl/>

De **VisiQuick** koppeling is vooral handig bij het aanvragen van machtigingen bij **Vecozo**. **TabDents** vult vanuit de eigen foto-tabs en de tab brieven de inhoud van de te verzenden documenten, op volgorde van aanmaken, daaruit kan een selectie worden gemaakt bij verzenden naar **Vecozo**:

TabDents - [BeGarbage, BeBob [M] 09-12-1955 (1) 0002-1 - 62 jaar - 1 - Praktijk Tooth = (1) - J. van der Tooth]

Bestand Beeld Venster Help

Persoonsgegevens Status Parodontiumstatus Anamnese Brieven Bijzonderheden

Historie Röntgenfoto's Lichtfoto's en video's Financieel

Te declareren Betaalde declaraties Opgenstaande declaraties Begrotingen Betalingsafwikkeling Factoring Verzekeraar

Vecozo machtigingen...

Datum	Debituer	Declarant	Behandelaar	Bedrag begroting	UPT	Element	Aantal	Omsch
20-04-2018	B.B. BeGarbage - (1) 0002-1	J. van der Tooth, Tandarts (1) - Praktijk Tooth	(1) J. van der Tooth	530,45	C11	1	1	periodieke controle
					X21	1	1	kleine röntgenfoto: bw
					V93	26	1	kleine röntgenfoto: ve
						26	1	kaakoverzichtsfoto: td
						26	1	drievaksvulling compos
						26	1	All-etch
						26	1	Clearfil® SA Primer
						26	1	Ketac Molar®
					R24	27	1	kroon met schouder
					X10	2	1	kleine röntgenfoto: td
					R00	27	1	techniekkosten kronen
						27	1	laboratorium <standa

Verberg niet actuele begrotingen - X

Gereed Behandeldatum: vrijdag 20 april 2018 17:24 Memory OK - FreeMem: 12.685.988 Kb

TabDents Vecozo Machtigingen

Bestand Instellingen Help

(01) 0002-1 [M] B.B. BeGarbage (05-12-1955)
BSN 999992004

Afsluiten

Machtiging aanvragen Machtigingen inzien Machtigingsportaal

Aanvrager van de machtiging: 1 - J. van der Tooth, Tandarts

Type machtiging: Bijzondere Tandheelkunde

ID	Datum	Begroten	Behandelaar	ID	Machtiging verplicht	UPT	Element	Aantal	Honorarium	Techniek	Datum begroting	Omschrijving
435	20-04-2018	✓	J. van der Tooth	435	<input type="checkbox"/>	C11	1	1	€ 21,00	€ 0,00	20-04-2018	periodieke controle
435				435	<input checked="" type="checkbox"/>	R24	27	1	€ 243,13	€ 100,00	20-04-2018	kroon met schouder
435				435	<input checked="" type="checkbox"/>	V93	26	1	€ 69,07	€ 0,00	20-04-2018	drievaksvulling composiet groep CO el:6-8
435				435	<input type="checkbox"/>	X10	2	2	€ 30,94	€ 0,00	20-04-2018	kleine röntgenfoto: td
435				435	<input type="checkbox"/>	X21	1	1	€ 66,31	€ 0,00	20-04-2018	kaakoverzichtsfoto: td

Extra documenten Brieven Röntgenfoto's Foto's

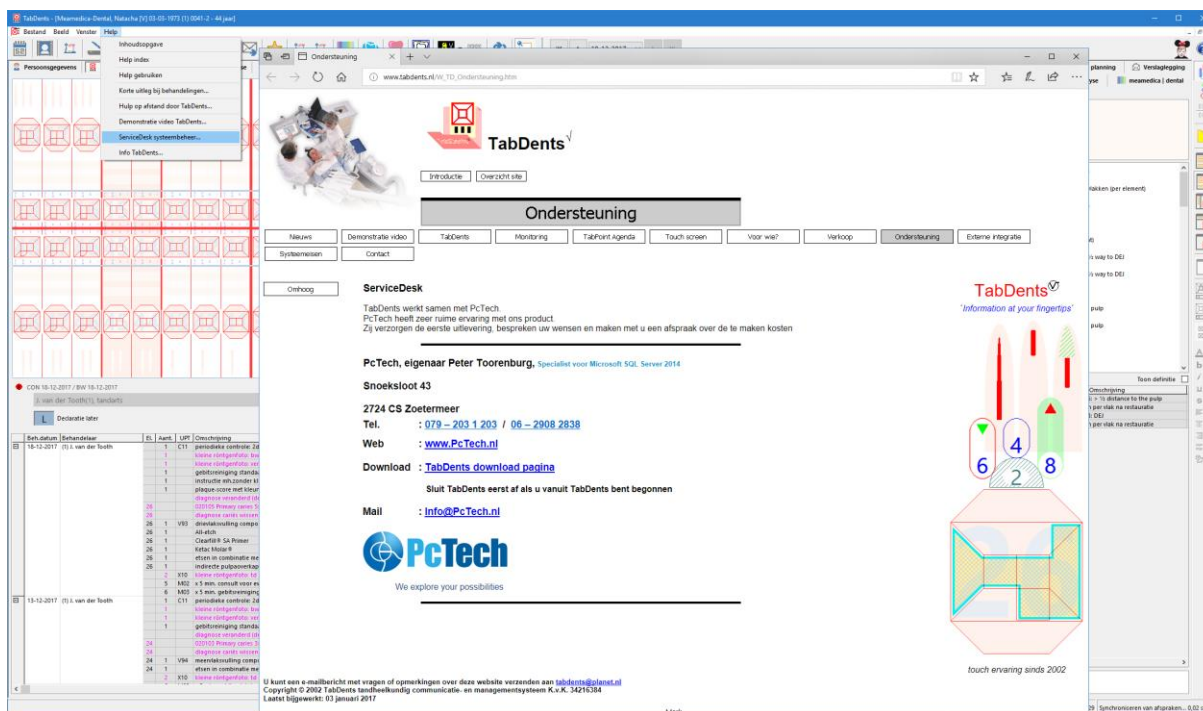
TabDents - VisiQuick 3 Installatie.pdf van der Tooth Aan Molar Over XRay_100021_8.jpg [20-04-2018] XRay_100021_7.jpg [06-02-2018] XRay_100021_6.jpg [06-02-2018] XRay_100021_4.jpg [11-09-2018] Photo_100021_2.jpg [20-04-2018] Photo_100021_1.jpg [28-08-2018]

Kies de aanvrager van de machtiging en het type machtiging en voeg zonodig extra documenten toe.
- Kies geen begroting en voeg op de website van Vecozo de UPT codes toe.
- Kies één of meer begrotingen met één of meer UPT codes uit de begroting (op de website van Vecozo kunnen alsnog bestanden en UPT codes worden toegevoegd).
Alleen UPT codes en bestanden MET een vink worden meegestuurd.
Klik na het maken van de keuzes op 'Machtiging aanvragen'.

Machtiging aanvragen

Klik op 'Machtiging aanvragen' Grootte ingesloten bestanden: 724 kb

1. Update van **TabDents**: Download de laatste versie van **TabDents**, minimaal versie 1233-08. Ga in **TabDents** naar menu Help>Servicedesk systeembeheer en klik op 'TabDents download pagina'.



2. Drag and drop mogelijkheid I:

Open **VisiQuick** met de knop in de taakbalk, en zet zonodig ook de pop-up mogelijkheid aan. Selecteer aan de linker zijkant in **VisiQuick** de te kopiëren foto.

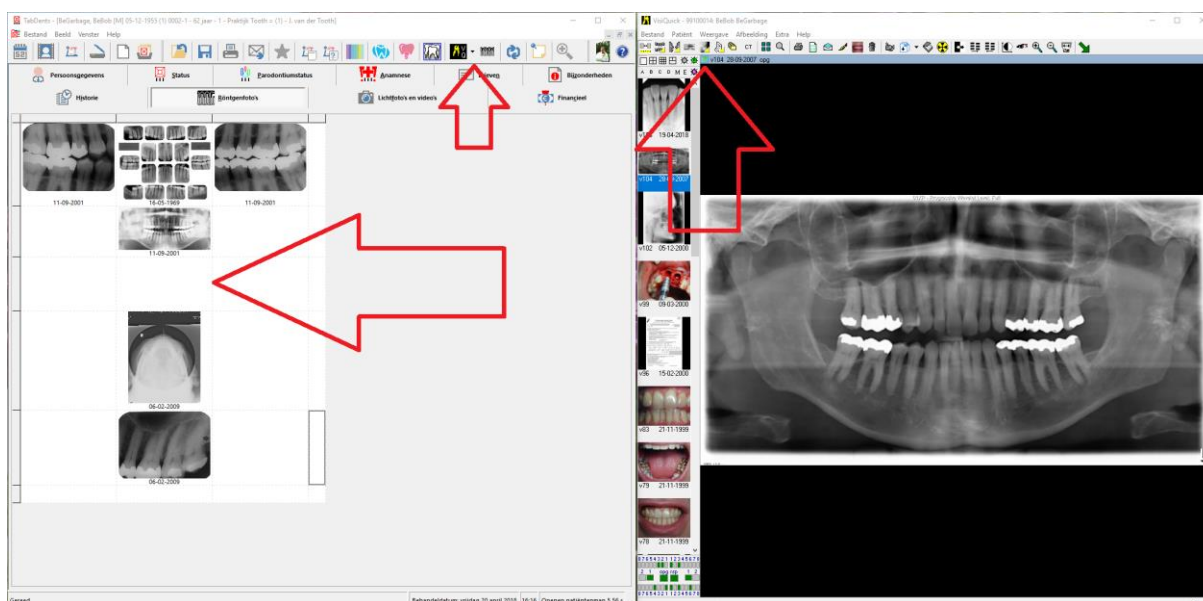
Druk met de linker muisknop de kleine knop links boven in, houd de knop ingedrukt en sleep dan de foto naar de gewenste plaats in **TabDents**.

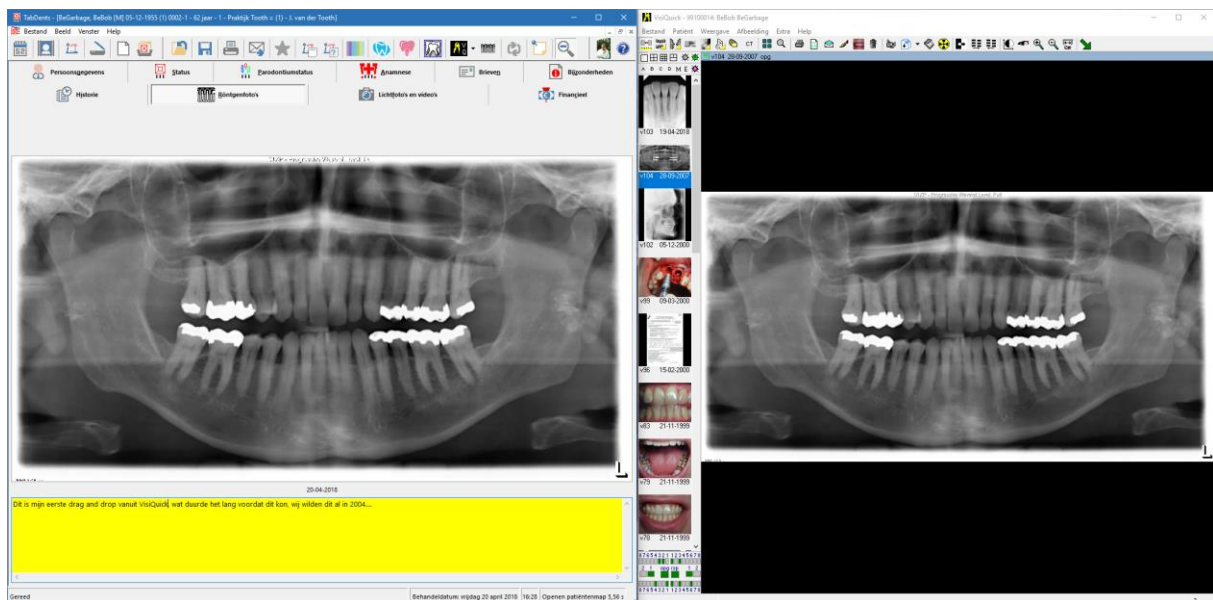
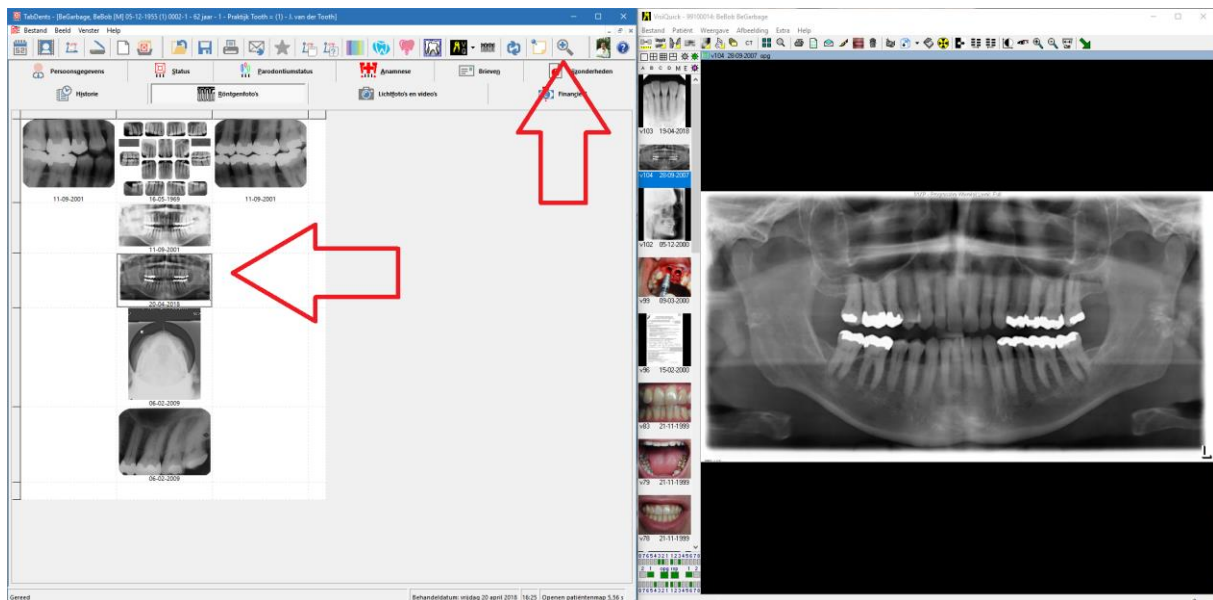
Laat dan de knop los.

Annoteer zonodig door de foto te vergroten via de taakbalk of via dubbelklikken op de foto.


Ook kan de foto via drag and drop naar een ander vak worden verplaatst om een logischer lay-out te krijgen.

Sla de nieuwe setting op met de taakbalkknop 'Opslaan'.





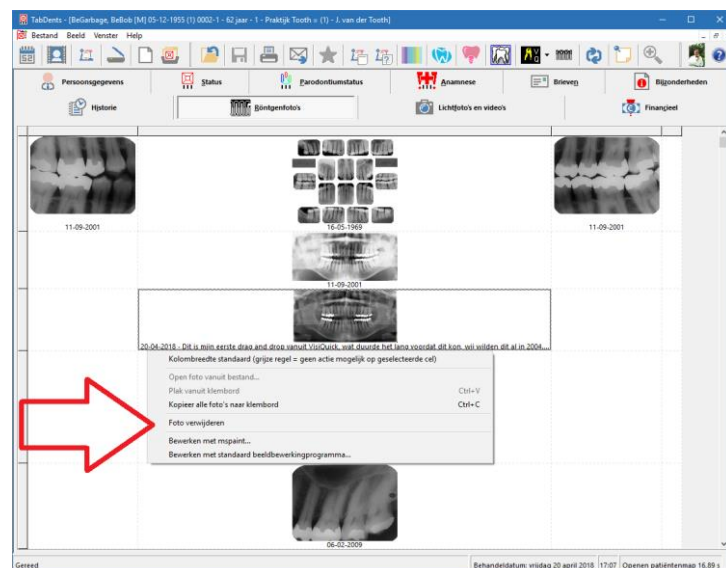- Een onjuist geplaatste foto is te verplaatsen, of te verwijderen via de rechter muisknop en een pop-up menu.



3. Drag and drop mogelijkheid II:

Open **VisiQuick** met de knop in de taakbalk, en zet zonodig ook de pop-up mogelijkheid al aan. Selecteer aan de linker zijkant in **VisiQuick** de te kopiëren foto.

Open in **TabDents** de beeldcentrale met de knop linksboven.

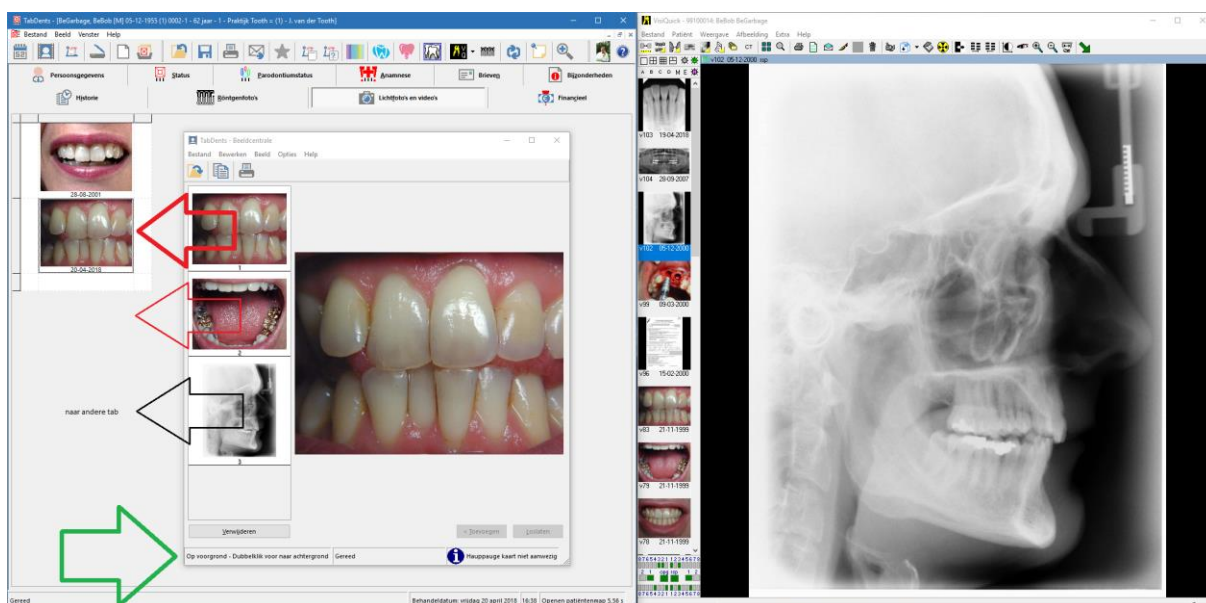
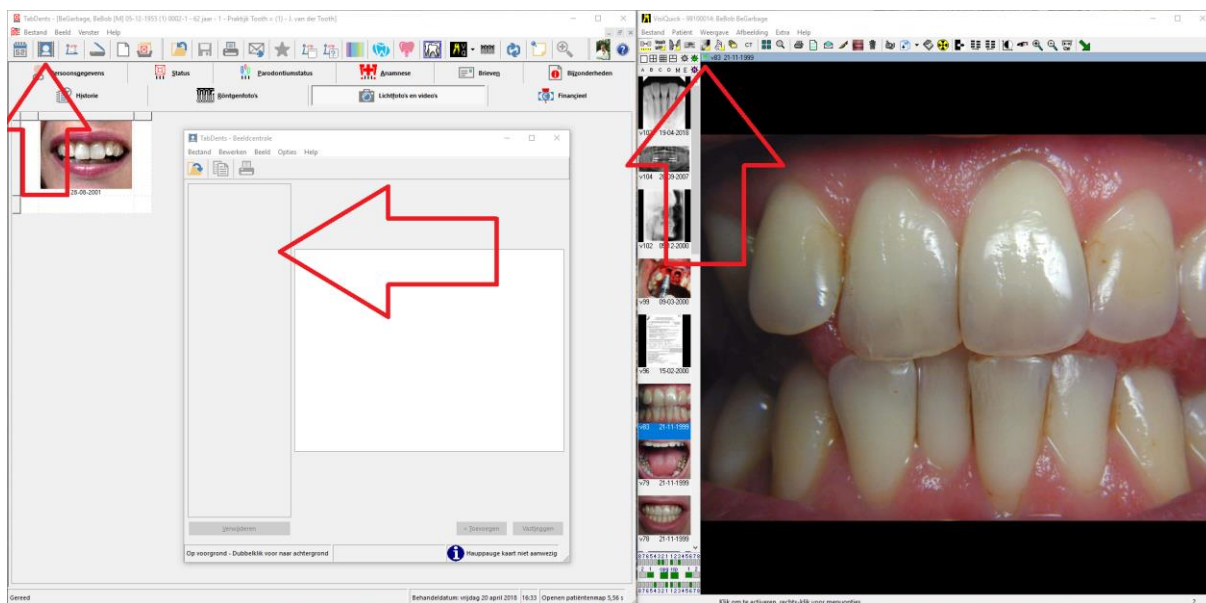
Dubbelklik in de onderrand van de beeldcentrale om deze op de voorgrond te houden.

Druk met de linker muisknop op de kleine knop links boven in **VisiQuick**, houd de knop ingedrukt en sleep dan de foto naar de gewenste plaats in de *beeldcentrale* van **TabDents**.

Helaas kent de foto zelf wel drag and drop, maar dan alleen binnen **VisiQuick**, even wennen.

Laat dan de knop los.

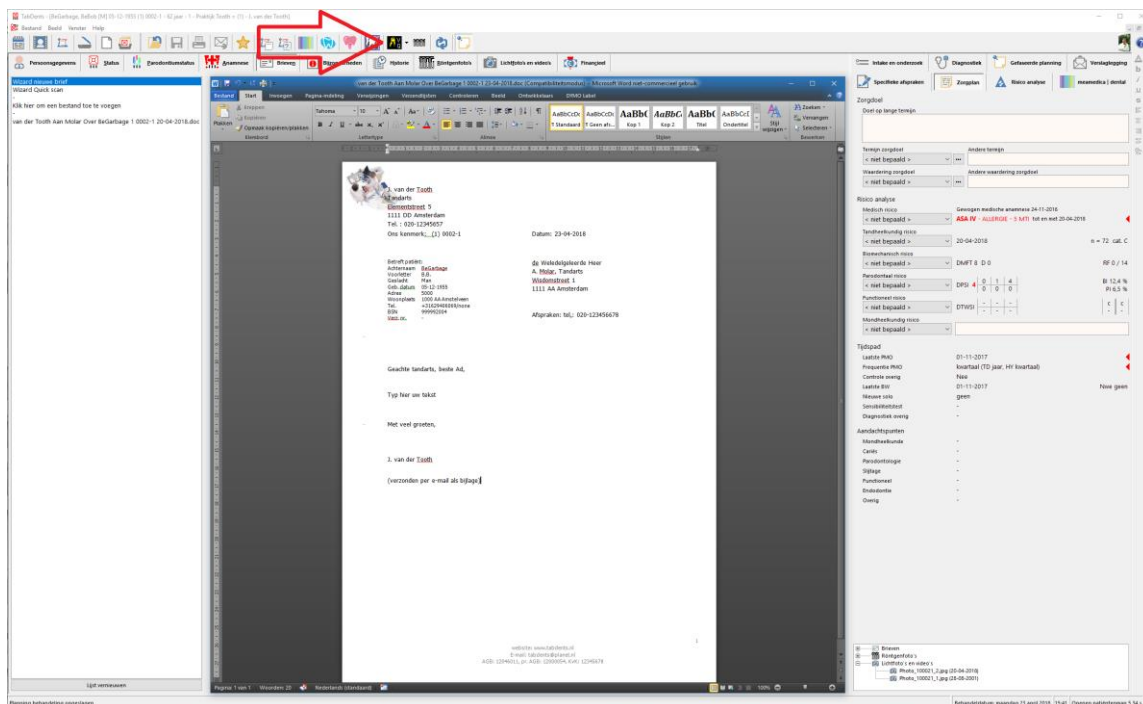
Sleep daarna de lijst, die in de beeldcentrale ook meer dan 1 foto kan gaan bevatten, stuk voor stuk naar de gewenste plaats, op de foto als lichtfoto.




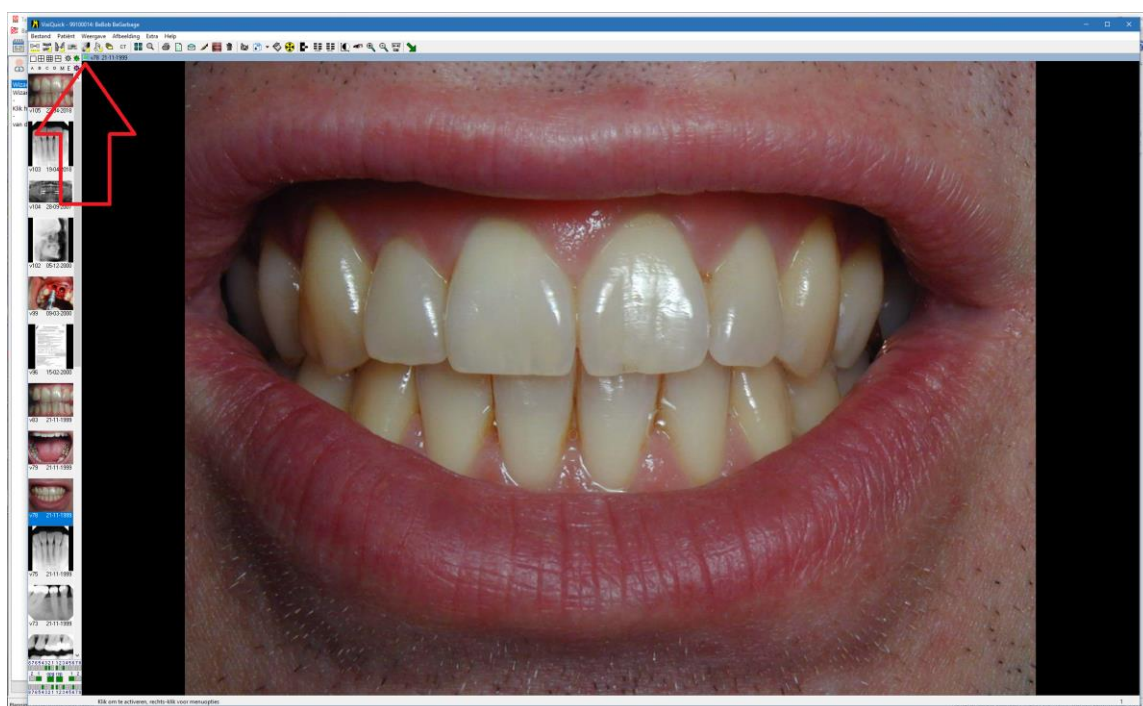
- Voordeel van de beeldcentrale is dat deze op de voorgrond blijft staan en dat de foto gedurende sessie van **TabDents** in de centrale blijven. Daardoor kan de plaatsing in diverse tabs apart gedaan worden.

4. Drag and drop mogelijkheid III:

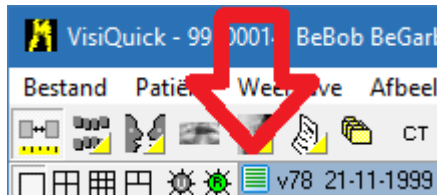
- Open eerst **VisiQuick** met de knop in de taakbalk van **TabDents** .



- De beeldcentrale mag openblijven, maar wordt gesloten als de brief per mail wordt verstuurd.
- Ga in **VisiQuick** terug met de knop 'Terug' of F9. 
- Open dan pas de brief.
- Open **VisiQuick** met de taakbalkknop.
- Selecteer aan de linker zijkant in **VisiQuick** de te kopiëren foto.




- Druk met de linkermuisknop op de kleine knop linksboven in **VisiQuick**,



- houd de knop ingedrukt en sleep dan de foto naar de **Word** knop (of **TabDents** of elk ander programma dat drag and drop ondersteunt) in de taakbalk,



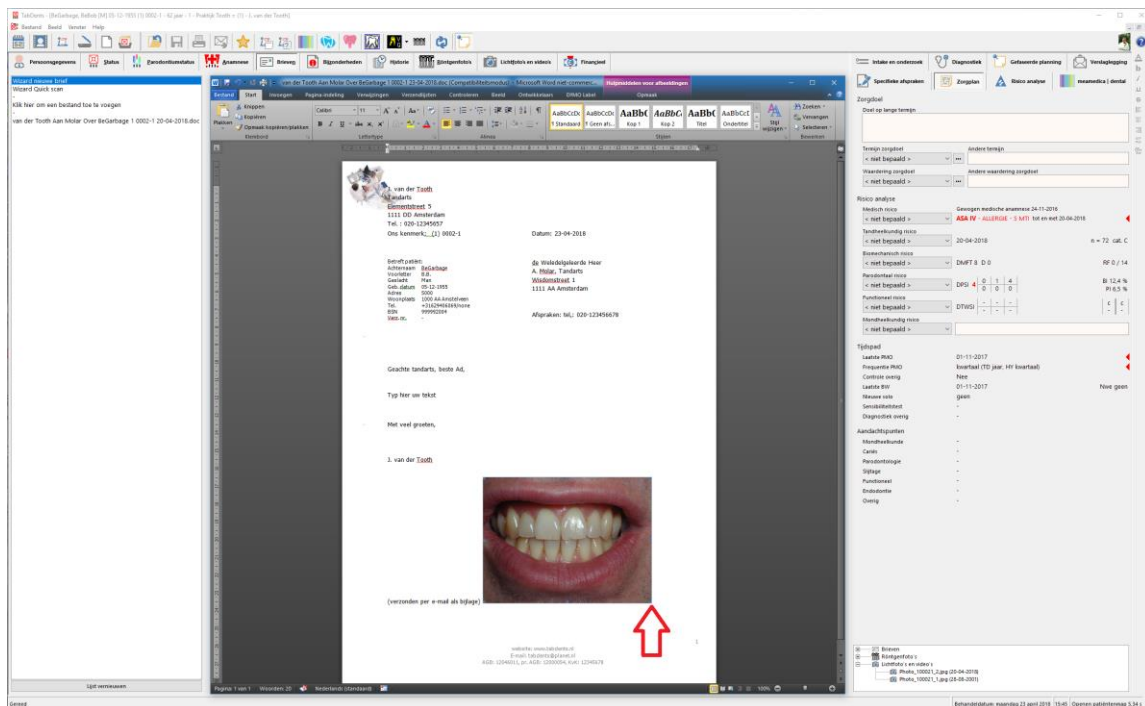- wacht daar even totdat **Word** (of het andere programma) zich opent en sleep dan verder naar de plaats waar de foto moet komen te staan.
- Laat dan de knop los.
- Daar waar de cursor zich bevindt wordt de foto geplaatst.
Door aan de hoekpunten te trekken kan de maat van de foto worden veranderd, ook kan de centrering van de foto worden aangepast.



Methode **III** is de **Windows** manier van drag and drop voor programma's die het gehele beeldscherm innemen.

Deze methode is ook geschikt voor het toevoegen van (röntgen)foto's in E-mail verzonden als zelfstandige handeling. Laar daartoe in het vak 'Bijsluiten' de van (röntgen)foto vallen.
Zie punt 5.

5. E-mail vanuit **TabDents** met bijbehorende foto.
Vanuit de tab 'Röntgenfoto's', 'Lichtfoto's en video's' kan een (beveiligde) e-mail met attachment worden verstuurd. Er kunnen meer attachments worden toegevoegd.
Plaats in de tab de muis boven de foto en druk met de rechtermuisknop op de foto.
Kies 'E-mail verzenden met foto...'.
De gekozen foto wordt getoond.
Via 'Document bijsluiten...' kunnen nog meer attachments worden toegevoegd.
Zie ook punt 4. voor drag and drop mogelijkheden.

E-mail verzenden

E-mail adres
500104282@lms.lifeline.nl

Geadresseerden...

Annuleren

E-mail adres CC
Geadresseerden CC...

Help

Onderwerp
Bericht voor A. Molar

Tekst (aanhef, evt. tussenvoegtekst en afsluiting)
Geachte tandarts, beste Ad,
Bijgaand treft u een begeleidend schrijven aan.

Verzenden

☐ SMTP (beveiligd)
☒ ZorgMail
☐ Outlook
☒ Word document als PDF

Met veel groeten,
J. van der Tooth, tandarts
Ons telefoonnummer voor afspraken: 020-12345657
Ons telefoonnummer voor spoedgevallen: 0627573787
Praktijk Tooth
Elementstreet 5

PDF

Document bijsluiten...

Bijsluiten	Type	Totaal 2,87 Mb	4 bijgesloten documenten
<input checked="" type="checkbox"/>	Word	0,70 Mb	an der Tooth Aan Molar over l
<input checked="" type="checkbox"/>	Foto	0,26 Mb	XRay_100021_8.jpg

F1 = Help

Standaard e-mail: ZorgMail - verzender: J. van der Tooth(1), tandarts

6. Installatie VisiQuick.

- Maak een Directory met de naam VisiQuick in de <drive> hoofddirectory van de locale PC, zoals c:\VisiQuick. **Let op: NIET** VisiQuickDemo! In Windows Vista zijn hiervoor 'administrator' rechten nodig.
- Kopieer het bestand VisiQuick\VQ3Demo.exe vanaf de **TabDents** CD naar deze directory.
- Dubbelklik in c:\VisiQuick op VQ3Demo.exe en installeer VisiQuick versie 3 in <drive>\VisiQuick.
- Kopieer het bestand
<drive>\Users(Vista) of Documents and Settings(XP)\<Naam>\AppData(Vista) of Application Data(XP)\TabDents\VisiQuick**vqdde32Versie3.dll**
naar
<drive>\Program Files\TabDents
en klik daarna met de rechter muisknop op dit bestand en kies 'Naam wijzigen'.
Noem dit bestand '**vqdde32.dll**'. In Windows Vista zijn hiervoor 'administrator' rechten nodig.
- Kopieer (eventueel) het bestand
<drive>\Users(Vista) of Documents and Settings(XP)\<Naam>\AppData(Vista) of Application Data(XP)\VisiQuick**vqdde32VisiQuick.ini**
naar
<drive>\Program Files\TabDents
en klik daarna met de rechter muisknop op dit bestand en kies 'Naam wijzigen'. Noem dit bestand '**vqdde32.ini**'. In Windows Vista zijn hiervoor 'administrator' rechten nodig.
- De inhoud van het bestand vqdde32.ini dient te verwijzen naar de plaats waar VisiQuick de foto's opslaat.
- Start VisiQuick door op het icoon van VisiQuick of in bestandslijst van 'Start' op VisiQuick te klikken.
- Kies menu 'Patiënt' - 'Kies Patiënt' en selecteer de demo patiënt met foto's.
- De foto's tonen zich nu.
- Kies menu 'Patiënt' en 'Eigenschappen'.
- Onderaan staat 'Patiënt_ID'.
- Aangezien de **TabDents** testdatabase dit nummer niet kent dient dit te worden veranderd om een demo mogelijk te maken met de bijbehorende pop ups.
- Kies Pijltje omlaag en klik op 'Patiënt_ID aanpassen...'.
• Type '4'. Dit is het interne volgnummer van 'BeGarbage', dus het getal is kritisch!
• Klik 'OK'.
- Kies menu 'Extra' - 'Externe programma-instellingen' - Tab 'Admin link'
- Open Instellingen voor admin link - Configuratiebestand (via mapje openen) en zoek naar 'C:\Program Files\TabDents\vqdde32.ini'.
- Klik OK.
- Sluit VisiQuick af.
- Open **TabDents**.
- Kies menu 'Extra' - 'Opties' - 'Externe koppelingen'.
- VisiQuick en ook Pop up moeten nu aanvinkbaar zijn.
- Vink 'Maak gebruik VisiQuick mogelijk' en '..pop up mogelijk'.
- Indien het een geheel nieuwe installatie betreft dient nummeraansturing '**vaste volgnummers**' worden gekozen. Formaat naam patiënt: **Standaard**, formaat nummer patiënt: **Standaard**, datum doorgeven: **Geen datum**. Al deze items zijn bij een overzetting vanuit een vorig pakket instelbaar, maar voor de demo niet nodig.
- Klik 'Toepassen en sluit opties af'.
- Open de testdatabase en daarna de patiëntenmap van BeGarbage.
- Klik op Tab 'Status'.
- Klik op het icoon van VisiQuick op de taakbalk. VisiQuick opent zich. Klik op **TabDents** in de taakbalk van Windows.
- Klik op het nu beschikbaar gekomen icoon voor VisiQuick pop up.
- Kies de weergave zonder letters of het overzicht.
- Op de plaats van de 'E' voor extractie/endo staat nu een '**X**' als er een foto beschikbaar is.
- Idem aan de rechterzijde voor OP etc.
- De foto wordt getoond na even pauzeren boven de '**X**'.
- Resize het scherm zodat de pop up niet te groot is en hoover over de '**X**'-en.
- Als deze stappen correct worden uitgevoerd is snel een indruk te krijgen van de functionaliteit. Nooit meer zoeken naar de foto's!

Zie ook: Menu Help Index VisiQuick.

PcTech, dealer van **VisiQuick**, kan uitleg geven en behulpzaam zijn bij installatie.

Stand van zaken 17 december 2019